

# Ein großes Stück Lebensqualität

Ein kleines Hilfsmittel – Kontinenzversorgung mit Peristeen® Anal-Tampon

**Peristeen®**



# Ihre Vorteile im Überblick

## So sanft

Reduzierung von Hautirritationen und vermindertes Risiko von Dekubitusentstehung und Harnwegsinfekten.

## So sicher

Reduzierter Pflegeaufwand dank einfacher Handhabung und zuverlässiger Versorgung des Bewohners bzw. Patienten – bis zu zwölf Stunden.

## So sauber

Unangenehme Gerüche und Wäscheverschmutzungen werden minimiert, Waschkosten reduziert.

## So simpel

Förderung der Selbstständigkeit des Bewohners und des Toilettentrainings durch die Umstellung von Inkontinenzslips auf Inkontinenzvorlagen.

## Abrechnung/Erstattung

Der Peristeen® Anal-Tampon kann zur Therapie der Stuhlinkontinenz als Hilfsmittel verordnet werden. Das Rezept wird nach Indikationsstellung vom behandelnden Arzt ausgestellt. Grundlage für diese Abrechnung ist das SGB XI, Prävention bzw. aktivierende Pflege. So fördert der Peristeen® Anal-Tampon die Selbstständigkeit des Patienten und erhält seine Lebensqualität.

Das abgebildete Beispielrezept zeigt Ihnen die wichtigsten Punkte für eine Monatsversorgung\* mit dem Peristeen® Anal-Tampon.

**Gut zu wissen:** Die Pauschale pro Bewohner für die Versorgung mit aufsaugenden Inkontinenzhilfsmitteln bleibt davon unberührt.

### Wichtig

Auf dem Rezept ist ein Hinweis auf den Verordnungsgrund anzugeben, z. B. Stuhlinkontinenz

## Was muss auf das Rezept?

Inkontinenzhilfsmittel sind weder budget- noch richtgrößenrelevant. Die Verordnung muss immer auf einem Hilfsmittelrezept oder separaten allgemeinen Rezept erscheinen. Auf einem allgemeinen Rezept immer Ziffer 7 (Hilfsmittel) und Patientendaten eintragen. Bei Verordnung mit spezifischen Produktangaben die 7-stellige Hilfsmittelverzeichnisnummer angeben.

Krankenkasse bzw. Kostenträger		HIS: 0789		Anzahl: 1	
Name, Vorname des Versicherten <b>Mustermann, Max</b>		geb. am <b>01.01.86</b>		Anzahl: 1	
Musterweg 19 12345 Musterstadt		Arbeitsstätten-Nr. <b>31-12345000</b>		Arzt-Nr. <b>123456-6-67</b>	
Kostenträgerkennung <b>104940005</b>		Versicherten-Nr. <b>A1234567891</b>		Status <b>1</b>	
Betriebsstätten-Nr. <b>31-12345000</b>		Arzt-Nr. <b>123456-6-67</b>		Datum <b>24.04.2017</b>	
Rp. (Bitte Leeräume durchstreichen)		Versorgungszeitraum: 30 Tage		3 Packungen Peristeen Anal-Tampon, groß	
Inhalt je Packung: 20 Stück + 1 Tube Gel		Diagnose: Stuhlinkontinenz		15.25.17.0002	
Unterschrift des Arztes <b>Dr. med. Max Mustermann</b> Allgemeinmediziner Musterstraße 20   12345 Musterstadt Tel. 012 1567   Fax 012 98765		Abgabedatum in der Apotheke		Unterschrift des Arztes Muster 16 (03.2015)	
Bei Arbeitsunfall auszufüllen		Untfalltag		Untfallbetrieb oder Arbeitsgebernummer	

Wenn Sie Fragen zur Abrechnung des Peristeen® Anal-Tampons haben oder zu individuellen Sachverhalten beraten werden möchten, wenden Sie sich jederzeit gern an unsere Kundenberatung.

\* Verbrauch in Stück/Monat: 60 Anal-Tampons. Die aufgeführten Werte sind Richtwerte, die als Anhaltspunkt für den monatlichen Verbrauch der jeweiligen Produkte dienen. Die tatsächlichen Verbrauchswerte können durchaus über oder unter den Richtwerten liegen. Quelle: BVMed



## **Lebensqualität gewinnen – Zeit sparen mit Peristeen® Anal-Tampon**

*In der Kontinenzversorgung müssen stets zwei Ziele miteinander verbunden werden: die optimale Betreuung des Patienten sowie die Wirtschaftlichkeit der Versorgung. Der Peristeen® Anal-Tampon unterstützt Sie dabei.*

### **Produktbeschreibung**

Der Peristeen® Anal-Tampon wurde entwickelt, um den unkontrollierten Verlust von festem Stuhl zu verhindern. Er besteht aus weichem Schaumstoff (Polyurethan), der von einer wasserlöslichen Folie aus Polyvinylalkohol umgeben ist. Diese Folie komprimiert den Schaumstoff auf ein sehr geringes Maß, sodass der Anal-Tampon in Kombination mit dem beiliegenden Gleitgel einfach und angenehm einzuführen ist. Im Gegensatz zu Inkon-

tinenzslips/-einlagen hält der Peristeen® Anal-Tampon festen Stuhl bis zu zwölf Stunden sicher zurück. Die feinen Kapillaren im flexiblen Schaumstoff sorgen für einen sicheren Austritt der Darmgase. Mithilfe des Rückholbandes aus Polyester kann der Anal-Tampon jederzeit leicht entfernt werden. Der Peristeen® Anal-Tampon ist in zwei Größen erhältlich, sodass er sowohl für Erwachsene als auch für Kinder geeignet ist.

## Die Einsatzgebiete

Der Peristeen® Anal-Tampon ermöglicht seinen Anwendern eine optimale Versorgung bei Stuhlinkontinenz und aufgrund seiner Eigenschaften eine Verbesserung der Lebensqualität. Erfahren Sie alles über die möglichen Anwendungsgebiete und wann der Peristeen® Anal-Tampon nicht verwendet werden darf.

### Anwendungsgebiete

- › Altersbedingte Erschlaffung der Analmuskulatur
- › Verletzung des Schließmuskels
- › Stuhlinkontinenz ohne erkennbare Ursachen
- › Bei gelegentlichem Stuhlschmierern
- › Schlaganfall, Wachkomapatienten
- › Analatresie (angeborenes Fehlen der Analöffnung)
- › Multiple Sklerose, Querschnittlähmung, Spina bifida



### Nicht zu verwenden bei

- › Diarrhö (akuten Durchfall)
- › Morbus Crohn
- › Anal-Fistel, Wunde im Rektum
- › Dickdarmentzündung, Darminfektion
- › Hämorrhoiden (3. oder 4. Grades)




## Die Anwendung

Der Peristeen® Anal-Tampon wird – einschließlich Kompressionsfolie – wie ein Zäpfchen mit dem Finger vollständig in das Rektum eingeführt. Um das Einführen zu erleichtern, kann das beiliegende Gleitmittel verwendet werden. Nur das Rückholband bleibt draußen. Bereits 30 bis 60 Sekunden nach dem Einführen hat sich die Folie rückstandslos aufgelöst und der Schaumstoff des Tampons vollständig ausgedehnt. Dieser passt sich der Darmwand individuell an und dient so als sichere Barriere für den Stuhl. Mithilfe des außen liegenden Rückholbandes sollte der Tampon nach maximal zwölf Stunden wieder herausgezogen werden. Aufgrund seiner Schwimmfähigkeit darf der Peristeen® Anal-Tampon nicht in der Toilette entsorgt werden. Es kann drei bis vier Tage dauern, bis sich der Darm an den Anal-Tampon gewöhnt hat. Einem eventuell anfänglich unangenehmen Gefühl von verstärktem Stuhldrang kann mit entsprechenden Entspannungsübungen entgegengewirkt werden.


### Leichtes Einführen dank komprimierter Form




1 Anal-Tampon mit Gleitgel wie ein Zäpfchen einführen.

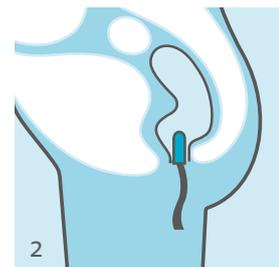

2 Schutzfolie des Tampons löst sich nach kurzer Zeit auf.

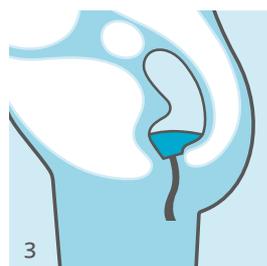

3 Anal-Tampon passt sich der Darmwand an.

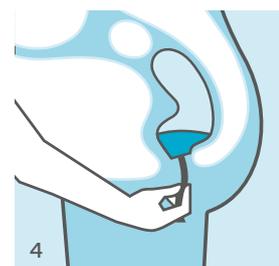

4 Anal-Tampon mit Rückholband wieder entfernen.

## Mehr Lebensqualität


Der Peristeen® Anal-Tampon hat viele Vorzüge. Mit ihm können die Anwender...

- › die Vorteile einer einfachen Handhabung genießen.
- › die Mobilität verbessern und das Gefühl von Sicherheit und Freiheit entdecken.
- › die Lebensqualität dank Diskretion und Tragekomfort erhöhen.
- › die Geruchsentstehung vermeiden und Hautirritationen verringern.
- › das Risiko eines Dekubitus und von Harnwegsinfektionen reduzieren.
- › von Inkontinenzslips auf Vorlagen umstellen und damit selbstständiges Toilettentraining fördern.

## Studienergebnisse<sup>1</sup>


### Fast vollständige Kontinenz

Um das hohe Qualitätsniveau unserer Produkte zu halten, werden sie im Rahmen klinischer Studien getestet. Das Studienergebnis zeigt, dass mit dem Peristeen® Anal-Tampon fast vollständige Kontinenz erreicht werden kann. Bei 82% der Testpersonen kam es zu weniger als zwei unfreiwilligen Stuhlverlusten innerhalb von 18 Tagen.

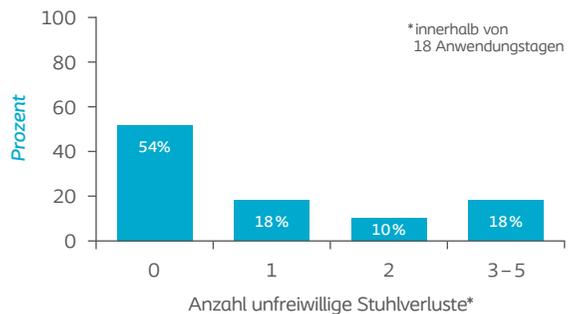

### Freiheit durch Sicherheit

Das Gefühl von Sicherheit ist die Basis für die aktive Teilnahme am Leben trotz Stuhlinkontinenz. 80% der Testpersonen fühlen sich bei Verwendung des Peristeen® Anal-Tampons sehr sicher, und 53% der Teilnehmer gaben an, ein neues Gefühl der Freiheit zu verspüren.

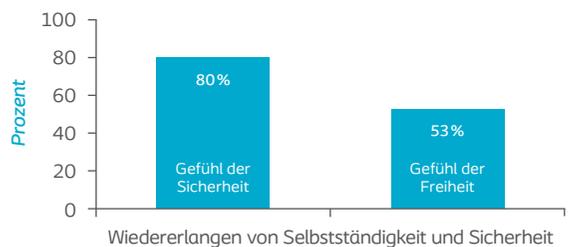

### Produktzufriedenheit in Zahlen

Die Zufriedenheit der Anwender ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Freude über die Auswertungen war dementsprechend groß: 87% der Anwender sind sehr zufrieden und werden Peristeen® Anal-Tampon weiter benutzen. 97% würden die Benutzung Dritten weiterempfehlen.



# Bestellinformationen

## Peristeen® Anal-Tampon



Artikel-Nr.	Größe	Packungseinheit	PZN	HMV-Nr.
1450	Klein	20 + 1 Tube Gel	04207666	15.25.17.0002
1451	Groß	20 + 1 Tube Gel	04207672	15.25.17.0002

Für mehr Informationen und die  
Möglichkeit der Musterbestellung  
EINFACH QR-CODE SCANNEN



## Kennen Sie bereits das Peristeen® Komplettsystem zur Tranalaten Irrigation?



Die Peristeen® transalae Irrigation wurde für Menschen entwickelt, die an chronischer Verstopfung und Stuhlinkontinenz leiden oder aufgrund einer neurogenen Darmfunktionsstörung viel Zeit für ihr Darmmanagement benötigen. Peristeen® ist ein effektives System zur Entleerung des Darmes und hat sich bei Stuhlinkontinenz und Verstopfung bewährt.

Sprechen Sie Ihren Coloplast Betreuer an und lassen Sie sich ein Infopaket zu Peristeen® schicken. Oder erfahren Sie mehr im Netz unter [www.peristeen.de](http://www.peristeen.de).

### Referenzen

1. P.A. Lehur et al. Incontinence fécale du patient neurologique: Résultats cliniques du tampon obturateur anal Peristeen® Obtal®. Correspondances en Pelvi-Périnéologie 2004; volume IV, N° 3: 24–35.

### Weitere Studien zu Peristeen® Anal-Tampon

2. Bond et al. Anal Plugs for the Management of Fecal Incontinence in Children and Adults. J.Clin Gastroenterol, volume 14, No. 1, January 07. 3. W. Pfrommer et al. A new polyurethane anal plug in the treatment of incontinence after anal atresia repair. Eur J. Pediatr Surg 2000; 10: 186–90. 4. Mortensen, Smilgin Humphreys M. The anal continence plug: a disposable device for patients with anorectal incontinence. Lancet 1991; 337: 295–7.